

## EdU细胞增殖流式检测试剂盒(绿色, FITC)

货号: P-CA-046

### 产品简介

EdU细胞增殖流式检测试剂盒, 操作便捷、灵敏度高, 适用于细胞悬液样本的增殖检测, 检测结果可通过流式细胞仪进行分析。

### 检测原理

细胞增殖检测广泛应用于细胞活性、遗传毒性及抗肿瘤药物效果的评价中, 直接检测细胞中的DNA合成被认为是最精确的检测细胞增殖的方法。最初广泛使用的检测细胞中DNA合成的方法是放射性标记核苷掺入法, 但该方法由于有放射性污染并且很难实现单细胞检测而受到很大的限制, 随后逐渐被基于抗体检测的BrdU法所替代。BrdU法步骤繁多, 且需要使用BrdU抗体, 影响因素较多, 稳定性较差。

EdU法基于EdU掺入和后续的点击反应, 无需使用抗体、操作便捷、检测灵敏度高, 是一种在BrdU法基础上升级换代的新方法, 将会逐步取代BrdU法。EdU(5-ethynyl-2-deoxyuridine), 中文名5-乙炔基-2-脱氧尿苷, 是胸腺嘧啶脱氧核苷类似物, EdU可以在DNA合成过程中替代胸腺嘧啶脱氧核苷掺入到新合成的DNA中。另一方面, EdU上的乙炔基能与荧光标记的小分子叠氮化物探针(如FITC Azide、PriFluor 488 Azide、PriFluor 594 Azide、PriFluor 647 Azide), 通过一价铜离子的催化发生共价反应, 形成稳定的三唑环, 该反应非常迅速, 被称作点击反应(Click reaction)。通过点击反应, 新合成的DNA会被相应的荧光探针所标记, 从而可以使用适当的荧光检测设备检测到增殖的细胞。

### 检测样本类型

悬浮细胞  贴壁细胞

### 产品组分

产品名称	50 Assays	200 Assays	Storage
EdU(10mM)	200 $\mu$ L	800 $\mu$ L	-5~-20°C
Click Reaction Buffer I	25 mL	50 mL $\times$ 2	-5~-20°C
FITC Azide I	60 $\mu$ L	250 $\mu$ L	-5~-20°C, 避光
CuSO <sub>4</sub>	1.25 mL $\times$ 2	8 mL	-5~-20°C
Click Additive	220 mg	220 mg $\times$ 4	-5~-20°C
说明书		一份	


注: 规格 50 Assays 指的是用 6 孔板进行实验可以检测 50 个样本。



## 保存条件

-5~-20℃可保存一年。EdU(10mM)首次使用时需要分装(推荐50μL/小瓶或根据实验需要分装成更少量)。

## 实验流程

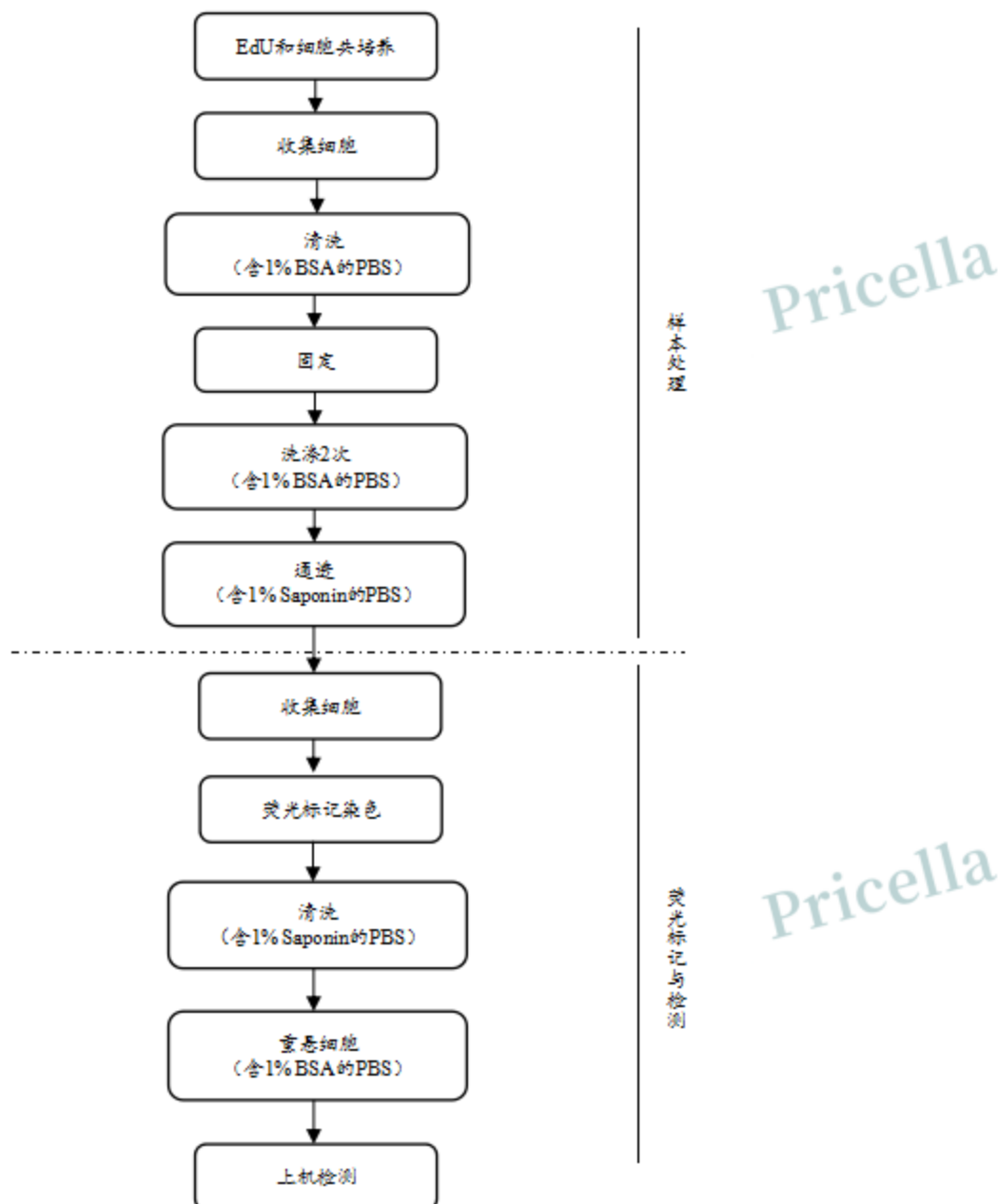

## 自备试剂及仪器

### 1) 试剂

PBS (含 1% BSA) 缓冲液 (pH7.2~7.6)。

通透液: 1% Saponin (溶剂为 PBS, pH7.2~7.6)。

固定液: 4%多聚甲醛 (溶剂为 PBS, pH7.2~7.6)。

去离子水。

### 2) 仪器

流式细胞仪、离心机。

## 试剂配制

### Click Additive Solution

取 1.1 mL 去离子水加入到一管 Click Additive(220 mg)中, 混匀至全部溶解。配制后可以适当分装, 并于-5~20°C保存。

**注: 建议使用完一管 Click Additive 后再配制下一管。**

## 实验步骤

### 1. EDU和细胞共培养

1) EdU 的标记浓度应根据所用的细胞类型做相应的优化选择, 细胞培养基、细胞生长密度及细胞类型和其他实验条件都有可能影响细胞的标记效果, 推荐以 10  $\mu$ M 的 EdU 初始浓度进行摸索。

2) 预实验中, 建议设置不同浓度梯度的 EdU 染色液, 以确定最佳的实验浓度。也可以参考本操作说明《附表 2. 常见细胞系 EdU 孵育时间设定参考》以及《附表 3. 细胞实验 EdU 孵育浓度及时间参考》。

**注: 建议使用不添加 EdU 的细胞样本作为阴性对照。**

### 2. 固定与通透

**注: 以下步骤中试剂使用量以 6 孔板为参考, 其他培养孔可根据实验需要进行适当调整。**

1) 收集细胞, 300  $\times$ g 离心 5 min, 弃上清。

2) 加入 1 mL 含 1% BSA 的 PBS 溶液重悬细胞, 充分混匀后 300  $\times$ g 离心 5 min, 弃上清。

3) 加入 1 mL 含 4%多聚甲醛的 PBS 重悬细胞, 充分混匀后室温避光孵育 15 min。

4) 300  $\times$ g 离心 5 min, 弃上清, 加入 1 mL 含 1% BSA 的 PBS 溶液重悬细胞, 充分混匀。

5) 300  $\times$ g 离心 5 min, 弃上清, 加入 1 mL 含 1% BSA 的 PBS 溶液重悬细胞, 充分混匀后 300  $\times$ g 离心 5 min, 弃上清。

6) 加入 0.5 mL 含 1% Saponin 的 PBS 溶液混匀, 室温孵育 20 min。



### 3. 荧光标记

本说明书按照六孔板每孔 500  $\mu\text{L}$  的反应体系，对于 12、24、48、96 孔板，每孔加的 Click 反应液体积参考附录表 1。

1) 根据实验样本数，参考下表配制 Click 反应液。

组分	样本数						
	1	2	4	5	10	25	50
Click Reaction Buffer I	440 $\mu\text{L}$	880 $\mu\text{L}$	1.76 mL	2.2 mL	4.4 mL	11 mL	22 mL
CuSO <sub>4</sub>	40 $\mu\text{L}$	80 $\mu\text{L}$	160 $\mu\text{L}$	200 $\mu\text{L}$	400 $\mu\text{L}$	1 mL	2 mL
FITC Azide I	1 $\mu\text{L}$	2 $\mu\text{L}$	4 $\mu\text{L}$	5 $\mu\text{L}$	10 $\mu\text{L}$	25 $\mu\text{L}$	50 $\mu\text{L}$
Click Additive Solution	20 $\mu\text{L}$	40 $\mu\text{L}$	80 $\mu\text{L}$	100 $\mu\text{L}$	200 $\mu\text{L}$	500 $\mu\text{L}$	1 mL
总体积	500 $\mu\text{L}$	1 mL	2 mL	2.5 mL	5 mL	12.5 mL	25 mL

注：

- 请严格按照上表中组分顺序和体积配制 Click 反应液，否则会影响后续实验。
- Click 反应液需在配制后 15 min 内使用。

- 300 $\times$ g 离心 5 min，弃上清，每孔加入上述表格配制的 500  $\mu\text{L}$  的 Click 反应液，混匀，室温避光孵育 30 min。
- 300 $\times$ g 离心 5 min，弃上清，每孔加入 1 mL 含 1% Saponin 的 PBS 溶液混匀，300  $\times$ g 离心 5 min，弃上清。
- 加入 200  $\mu\text{L}$  含 1% BSA 的 PBS 溶液混匀，上机检测。

注：

- FITC 的最大激发波长是 490 nm，最大发射波长是 530 nm。
- 为避免荧光淬灭，请尽快检测。

### 附录

表1 Click反应液的使用量参考

	96孔板	48孔板	24孔板	12孔板	6孔板
Click 反应液	100 $\mu\text{L}$	150 $\mu\text{L}$	250 $\mu\text{L}$	400 $\mu\text{L}$	500 $\mu\text{L}$

表2 常见细胞系EdU孵育时间设定参考

细胞类型	人胚胎细胞	酵母细胞	人成纤维细胞	人宫颈癌细胞	人胚肾细胞系	人神经细胞
倍增时间	~30 min	~3 h	~18 h	~21 h	~25 h	~5 d
孵育时间	5 min	20 min	2 h	2 h	2 h	1 d



表3 细胞实验EdU孵育浓度及时间参考

PubMed ID	Reference	Cell line	Concentration	Time
19647746	Yu Y, et al. J Immunol Methods. 2009	Spleen cells	50 $\mu$ M	24 h
19544417	Momcilović O, et al. Stem Cells. 2009	Human ES cells	10 $\mu$ M	0.5 h
20080700	Cinquin O, et al. PNAS. 2010	emb-30	1 $\mu$ M	12 h
20025889	Han W, et al. Life Sci. 2009	VSMC	50 $\mu$ M	2 h
20659708	Huang C, et al. J Genet Genomics. 2010	ESC	50 $\mu$ M	2 h
21310713	Hua H, et al. Nucleic Acids Res. 2011	Fission yeast strains	10 $\mu$ M	3 h
20824490	Lv L, et al. Mol Cell Biochem. 2011	EJ cells	50 $\mu$ M	4 h
21248284	Yang S, et al. Biol Reprod. 2011	GC cells	50 $\mu$ M	2 h
21227924	Zhang YW, et al. Nucleic Acids Res. 2011	U2OS, HT29	30 $\mu$ M	1.5 h
21829621	Guo T, et al. PloS One. 2011	HIT-T15	50 $\mu$ M	4 h
21980430	Zeng T, et al. PloS One. 2011	MCF-10A	25 $\mu$ M	2 h
22012572	Ding D, et al. Int Orthop. 2011	C3H10T1/2	10 $\mu$ M	24 h
22000787	Zeng W, et al. Biomaterials. 2011	EPC	50 $\mu$ M	4 h
21913215	Xue Z, et al. J Cell Biochem. 2011	SGC7901	25 $\mu$ M	24 h
22016038	Peng F, et al. Lasers Med Sci. 2011	MSC	50 $\mu$ M	2 h
21878637	Li D, et al. J Biol Chem. 2011	HCC	50 $\mu$ M	2 h

## 声明

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究使用。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. EdU的标记浓度应根据所用的细胞类型做相应的优化选择，推荐以10  $\mu$ M的EdU初始浓度进行摸索，请提前做预实验确认EdU的最佳使用浓度。
4. 由于EdU标记反应在细胞内进行，且通过荧光显微镜检测，EdU标记前请确保细胞固定通透完全。如冬天室温过低，建议适当延长固定时间或4 $^{\circ}$ C固定过夜。
5. Click Additive配制成溶液后请注意适当分装。如果溶解后有白色物质析出，请上下颠倒多次，待全部溶解后方可使用。如该溶液颜色变成棕色，说明组分的有效成分已失效，请弃用。
6. 铜离子会影响GFP、RFP、mCherry等荧光蛋白的荧光，因此本试剂盒不适用于带GFP、RFP、mCherry等荧光的细胞检测。

